


100x140mm

Heated Massage Support Brace USER MANUAL

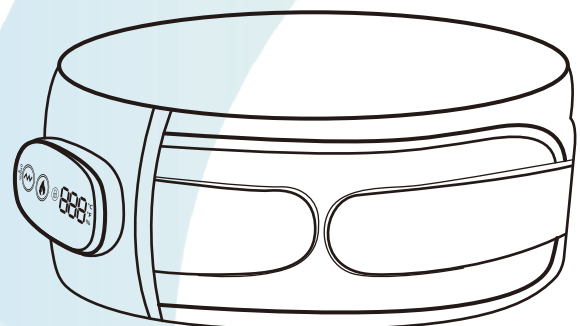

MODEL: 102319

Thank you for choosing our product.
Please read this manual carefully before use. After reading,
please keep the manual properly for future reference.

CONTENT

EN	1-6
FR	7-12

PRODUCT DESCRIPTION

Welcome to choose our newly upgraded Heated Massage Support Brace. Our product boasts excellent elasticity and flexibility, enabling it to closely conform to the curves of your waist while providing personalized support and massage effects. Whether you are working, driving or doing other daily activities, it can effectively reduce waist pressure, improve waist problems, and provide you with a full range of waist care, so that you can enjoy intimate health care in your busy life.

WARM REMINDER: This product is for relief only and is not a substitute for medical equipment or medications. If any discomfort or abnormality occurs during use, please stop using it immediately and consult a professional.

PRODUCT PARAMETERS

Material	Neoprene
Battery Type	955565 polymer lithium battery
Battery Capacity	5000mAh/18.5wh
Working Voltage	5V
Charging Current	2000mA
Charging Time	3.5hours

EASY TO WEAR




USING STEPS

- 01** Please inspect the product before use to ensure there is no breakage or obvious damage. Choose a quiet, comfortable environment so you can completely relax and enjoy your massage.
- 02** Wear the product on the area to be used and adjust the position to ensure it fits tightly on the massage area.
- 03** Long press the power button of the controller to turn on the device. If it cannot be turned on normally, it may be due to insufficient battery. Please charge it and try again.
- 04** Touch the vibration button to turn on the massage function. The display area displays "1", indicating that the current vibration level is 1. Touch the vibration button repeatedly to switch vibration gears: 1-2-3-0. The display area shows "0" and the massage function is turned off.
* When using it for the first time, it is recommended to start with a lower gear and gradually increase the intensity after getting used to it.
- 05** Touch the heating button to turn on the heating mode, the display area shows "45 °C", and the current heating temperature level is 1. Touch the heating button repeatedly to switch the heating temperature: 45 °C-50 °C-55 °C-60 °C-65 °C-0. The display area shows "0" and the heating function is turned off.
* When using it for the first time, it is recommended to start with a lower temperature, gradually adapt to it, and then increase the temperature to avoid high temperature burns on the skin.
- 06** The controller is equipped with dual temperature units of °C and °F. Long press the heating button and vibration button at the same time to switch the temperature unit.

- 07** Short press the power button, the button lock light will light up red, the controller buttons are locked, and the display area will briefly display the current power. You cannot operate the controller at this time to avoid accidentally touching the buttons while using the product. To operate the controller, press the power button to unlock it.
- 08** This product has a 30-minute timer function. After 30 minutes of use, the device will automatically shut down.
- 09** During use, long press the power button until the display area displays "OFF" to turn off the device.
- 10** After use, store the product and accessories safely in a dry and ventilated place away from direct sunlight or moisture.

Note: If you feel uncomfortable or find any abnormalities in the product during use, please stop using it immediately and contact customer service personnel for processing.

CONTROLLER

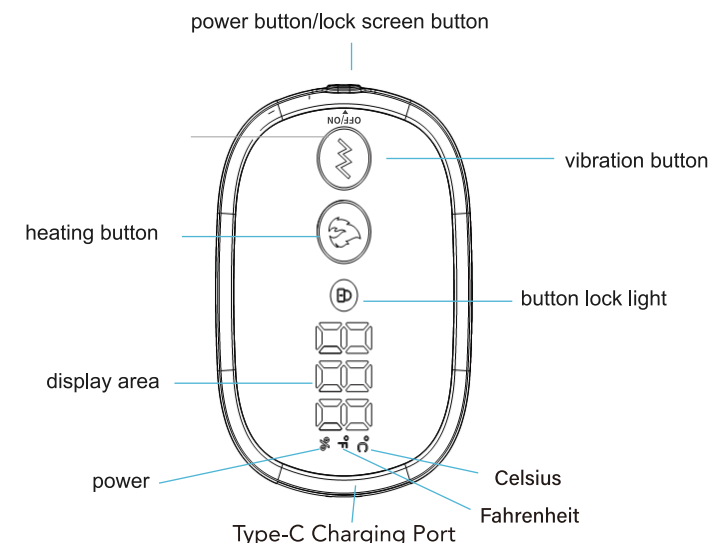

Note: The numbers on the controller screen indicate the massage gear, heating temperature (°C/°F) and charging current power & progress (%).
1. When setting the heating function, the number + °C/°F represents the heating temperature.
2. When setting the vibration function, the number represents the massage gear.
3. When the product is in use (not charging), the number + % represents the current power.
4. When the product is charging, the number + % represents the charging progress.

ABOUT CHARGING

- When the device is powered on, short press the power button, and the display area will show the current battery level.
- When the screen shows that the power is less than 20%, please charge it in time.
- Please make sure the device is turned off before charging.
- Take out the equipped charging cable, connect to the controller and the charging adapter. The display screen of the controller lights up, indicating that the device starts charging, and the numbers represent the current power. During the charging process, the number will slowly increase.
- The controller display shows "100%", indicating that the device is fully charged.

Note: When charging, please use our original charging cable, otherwise there may be problems with of not charging or not charging fully. Do not operate the controller during charging, otherwise may damage it.

PRECAUTIONS


- Excessive massage is harmful to the body.**
 - This product is a household appliance and cannot replace medical equipment or medicines.**
 - Incorrect operation may result in safety accidents or property damage.**
- Please make sure the product is completely dry before use.
 - When starting to use this product, it is recommended to select the low temperature mode. Slight redness and warmth of the skin after use is normal. Please feel free to use it. However, if severe skin redness and swelling occur after use, please stop use immediately and consult a doctor.
 - The device is not waterproof and cannot be used in a wet place.
 - It is recommended to avoid direct contact of the product with the skin.
 - It is recommended to start with the lowest temperature and gradually adjust to the appropriate temperature according to personal conditions to avoid scalding the skin of people who are not sensitive to heat.
 - Long-term use will cause the product temperature to be high, so be careful of burns. (Continuous use of the heating function should not exceed 30 minutes)
 - If the user experiences any discomfort during use, such as dizziness, headache, asthma, etc., please stop using it immediately; if necessary, please contact your doctor.
 - When not in use, please turn off the product and keep it in a clean and dry place.
 - Do not expose the device to sunlight or fire to avoid damaging the thermal conductor of the insulator.
 - Do not disassemble or modify the controller and circuit board at will to avoid artificial damage.

WARNING

CONSULT A DOCTOR BEFORE USE:
● Patients suffering from osteoporosis, fractures, sprains, acute pain and other leg diseases
● Patients with nerve disorders in the legs or sensory disturbances in the skin
● Pregnant or postpartum women
● Heart disease patients
* The product has a heating function, people who are not sensitive to temperature must pay attention.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Before cleaning, please make sure to disconnect the power completely.
- When cleaning, wipe the product with a damp cloth, but be careful not to wet the Type-C interface. Do not use strong cleaners or hard brushes.
- Lay flat to dry.
- This product does not support machine wash or hand wash.
- Do not dry clean.

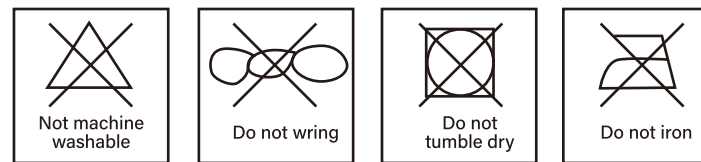

WARRANTY & AFTER-SALES SERVICE

365 Days Quality Guarantee
Thank you for purchasing our product. Your satisfaction and support are our greatest motivation. Please contact us directly if you have any questions. We will provide prompt service if you encounter any problem with our product.
Thank you!

DESCRIPTION DU PRODUIT


Nous vous invitons à choisir notre nouvelle orthèse chauffante de soutien au massage. Notre produit présente une élasticité et une flexibilité excellentes, ce qui lui permet d'épouser étroitement les courbes de votre taille tout en offrant un soutien personnalisé et des effets de massage. Que vous travailliez, conduisiez ou fassiez d'autres activités quotidiennes, il peut réduire efficacement la pression au niveau de la taille, améliorer les problèmes de taille et vous fournir une gamme complète de soins de la taille, de sorte que vous puissiez profiter de soins de santé intimes dans votre vie occupée.

RAPPEL CHAUD: Ce produit ne sert qu'à soulager et ne remplace pas un équipement médical ou des médicaments. En cas d'inconfort ou d'anomalie pendant l'utilisation, veuillez cesser de l'utiliser immédiatement et consulter un professionnel.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Matériau	Néoprène
Type De Batterie	Batterie au lithium polymère 955565
Capacité De La Batterie	5000mAh/18.5wh
Tension De Fonctionnement	5V
Courant De Charge	2000mA
Temps De Charge	3.5heures

FACILE À PORTER

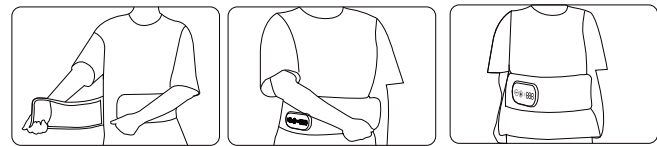


UTILISER LES ÉTAPES

- 01** Veuillez inspecter le produit avant utilisation pour vous assurer qu'il n'y a pas de casse ou de dommages évidents. Choisissez un environnement calme et confortable afin que vous puissiez complètement vous détendre et profiter de votre massage.
- 02** Portez le produit sur la zone à utiliser et ajustez la position pour vous assurer qu'il s'adapte bien à la zone de massage.
- 03** Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation du contrôleur pour allumer l'appareil. S'il ne peut pas être allumé normalement, cela peut être dû à une batterie insuffisante. Veuillez le charger et réessayer.
- 04** Touchez le bouton de vibration pour activer la fonction de massage. La zone d'affichage affiche "1", indiquant que le niveau de vibration actuel est de 1. Touchez le bouton de vibration à plusieurs reprises pour changer de vitesse de vibration: 1-2-3-0 et la fonction de massage est désactivée.
* Lors de la première utilisation, il est recommandé de commencer avec une vitesse inférieure et d'augmenter progressivement l'intensité après s'y être habitué.
- 05** Touchez le bouton de chauffage pour activer le mode de chauffage, la zone d'affichage indique "45 °C" et le niveau de température de chauffage actuel est 1. Touchez le bouton de chauffage à plusieurs reprises pour changer la température de chauffage : 45 °C-50 °C-55 °C-60 °C-65 °C-0. La zone d'affichage indique "0" et la fonction de chauffage est désactivée.
* Lors de la première utilisation, il est recommandé de commencer avec une température plus basse, de s'adapter progressivement, puis d'augmenter la température pour éviter les brûlures de la peau à haute température.
- 06** Le contrôleur est équipé de deux unités de température de °C et °F. Appuyez longuement sur le bouton de chauffage et le bouton de vibration en même temps pour changer l'unité de température.

- 07** Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation, le voyant de verrouillage des boutons s'allumera en rouge, les boutons du contrôleur sont verrouillés et la zone d'affichage affichera brièvement l'alimentation actuelle. Vous ne pouvez pas utiliser le contrôleur à ce moment pour éviter de toucher accidentellement les boutons lors de l'utilisation du produit. Pour faire fonctionner le contrôleur, appuyez sur le bouton d'alimentation pour le déverrouiller.
- 08** Ce produit dispose d'une fonction minuterie de 30 minutes. Après 30 minutes d'utilisation, l'appareil s'éteint automatiquement.
- 09** Pendant l'utilisation, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que la zone d'affichage affiche "OFF" pour éteindre l'appareil.
- 10** Après utilisation, rangez le produit et les accessoires en toute sécurité dans un endroit sec et aéré, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

Remarque: Si vous vous sentez mal à l'aise ou constatez des anomalies dans le produit pendant l'utilisation, veuillez cesser de l'utiliser immédiatement et contacter le personnel du service client pour le traitement.

CONTRÔLEUR

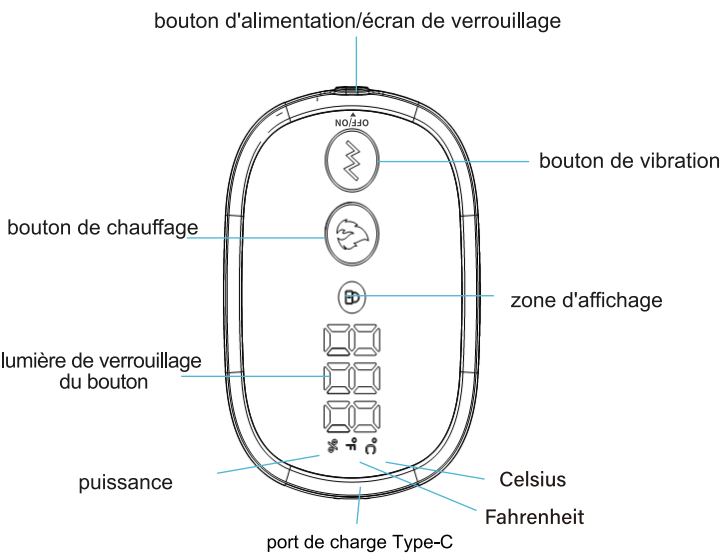

Remarque: Les chiffres sur l'écran du contrôleur indiquent l'équipement de massage, la température de chauffage (°C/°F) et la puissance et la progression du courant de charge (%).

- Lors du réglage de la fonction de chauffage, le chiffre + °C/°F représente la température de chauffage.
- Lors du réglage de la fonction de vibration, le numéro représente l'équipement de massage.
- Lorsque le produit est utilisé (pas en charge), le chiffre + % représente la puissance actuelle.
- Lorsque le produit est en charge, le chiffre + % représente la progression de la charge.

À PROPOS DE LA CHARGE

- Lorsque l'appareil est allumé, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation et la zone d'affichage affichera le niveau actuel de la batterie.
- Lorsque l'écran indique que la puissance est inférieure à 20 %, veuillez la charger à temps.
- Veuillez vous assurer que l'appareil est éteint avant de le charger.
- Retirez le câble de charge équipé, connectez-vous au contrôleur et à l'adaptateur de charge. L'écran d'affichage du contrôleur s'allume, indiquant que l'appareil commence à charger et les chiffres représentent la puissance actuelle. Pendant le processus de charge, le nombre apparaîtra, augmentant lentement.
- L'écran du contrôleur affiche « 100% », indiquant que l'appareil est complètement chargé.

Remarque: Lors du chargement, veuillez utiliser notre câble de chargement d'origine, sinon il pourrait y avoir des problèmes de ne pas charger ou de ne pas charger complètement. N'utilisez pas le contrôleur pendant le chargement, sinon vous pourriez l'endommager.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- Un massage excessif est nocif pour le corps.**
 - Ce produit est un appareil électroménager et ne peut remplacer un équipement médical ou des médicaments.**
 - Un fonctionnement incorrect peut entraîner des accidents de sécurité ou des dommages matériels.**
- Veuillez vous assurer que le produit est complètement sec avant utilisation.
 - Lorsque vous commencez à utiliser ce produit, il est recommandé de sélectionner le mode basse température. Une légère rougeur et une chaleur de la peau après utilisation sont normales. N'hésitez pas à l'utiliser. Cependant, si une rougeur ou un gonflement sévère de la peau apparaît après utilisation, veuillez arrêter immédiatement l'utilisation et consulter un médecin.
 - L'appareil n'est pas étanche et ne peut pas être utilisé dans un endroit humide.
 - Il est recommandé d'éviter tout contact direct du produit avec la peau.
 - Il est recommandé de commencer par la température la plus basse et d'ajuster progressivement la température appropriée en fonction des conditions personnelles pour éviter de brûler la peau des personnes non sensibles à la chaleur.
 - Une utilisation à long terme entraînera une température élevée du produit, alors faites attention aux brûlures. (L'utilisation continue de la fonction de chauffage ne doit pas dépasser 30 minutes)
 - Si l'utilisateur ressent un inconfort pendant l'utilisation, tel que des étourdissements, des maux de tête, de l'asthme, etc., veuillez cesser de l'utiliser immédiatement ; si nécessaire, veuillez contacter votre médecin.
 - Lorsqu'il n'est pas utilisé, veuillez éteindre le produit et le conserver dans un endroit propre et sec.

- N'exposez pas l'appareil au soleil ou au feu pour éviter d'endommager le conducteur thermique de l'isolant.
- Néanmoins, ne démontez pas ou ne modifiez pas le contrôleur et le circuit imprimé à volonté pour éviter des dommages artificiels.


AVERTISSEMENT

CONSULTER UN MÉDECIN AVANT UTILISATION :

- Patients souffrant d'ostéoporose, de fractures, d'entorses, de douleurs aiguës et d'autres maladies des jambes
- Patients souffrant de troubles nerveux des jambes ou de troubles sensoriels de la peau
- Femmes enceintes ou post-partum
- Patients atteints de maladies cardiaques
- Le produit a une fonction de chauffage, les personnes qui ne sont pas sensibles à la température doivent y prêter attention.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Avant le nettoyage, assurez-vous de débrancher complètement l'alimentation.
- Lors du nettoyage, essuyez le produit avec un chiffon humide, mais veillez à ne pas mouiller l'interface Type-C. N'utilisez pas de nettoyeurs puissants ni de brosses dures.
- Sécher à plat.
- Ce produit ne prend pas en charge le lavage en machine ou à la main.
- Ne pas nettoyer à sec.

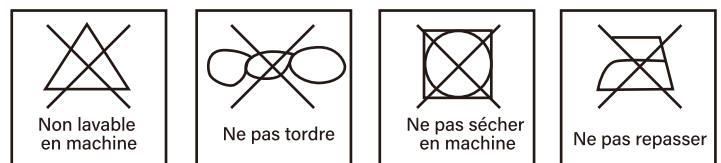

GARANTIE & SERVICE APRÈS-VENTE

Garantie De Qualité De 365 Jours
Merci d'avoir acheté notre produit. Votre satisfaction et votre soutien sont notre plus grande motivation. Veuillez nous contacter directement si vous avez des questions. Nous vous fournissons un service rapide si vous rencontrez un problème avec notre produit.
Merci!